


病院と同じようなリハビリが、自宅で簡単に。

サージカルアライアンス膝リハビリクッション

理学療法用器械器具 非能動型展伸·屈伸運動訓練補助器具 届出番号 12B3X10016000003



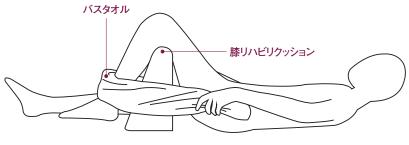

WEBでのご注文は http://s-a.jp

本品カバーは取り外し可能です。
洗濯機で通常通り洗えますので、いつも清潔に保てます。

材質:本体/ウレタン製、カバー/綿76%・ポリエステル24% 寸法:幅180mm×奥行146-179mm×高さ260-350mm

特許出願中 特願2015-148924


⚠ ご使用上の注意

- ・適切なサイズを使用し、適切な方法で使用すること
- ・圧迫による皮膚障害や血行障害を防止するため、過剰な力で使用しないこと
- ・本体部は洗濯しないこと

より深屈曲が可能な 方への使用方法


膝の屈曲角度が十分にあり、クッションの斜面にふくらはぎが接触してしまう場合は...

本製品のカバーを取り外すと、ウレタンが三分割されています。

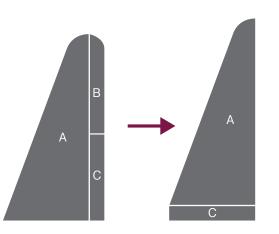

CをAの底面に移動させてカバーをつけ直します。こうすることで、より深い屈曲角度に対応可能になります。

※ Bは使用しませんが、反対足の手術を 予定されている場合等はなくさないよう に保存しておいてください。

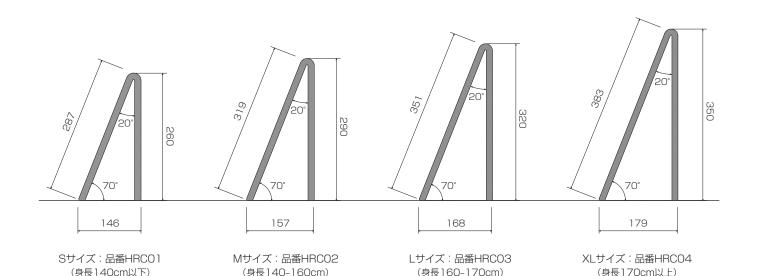

お問い合わせ先

Tel | 047-712-5629 Fax | 047-712-5630 Mail | info@s-a.jp

サージカルアライアンス株式会社

http://s-a.jp

本 社:〒105-0014 東京都港区芝3-24-1 駿河ビル2F Tel. 03-6435-2611 Fax. 03-6435-2614

PB事業部: 〒272-0032 千葉県市川市大洲3-15-2 Tel. 047-712-5629 Fax. 047-712-5630