



Surgical Alliance inc.

— Creation of New Value —

サージカルアライアンス

膝リハビリクッション


理学療法用器械器具 非能動型展伸・屈伸運動訓練補助器具
届出番号12B3X10016000003

入院中に
ベッド上で可動域の
セルフ訓練ができる

入院期間中の
スタッフの負担を
軽減する

病院と同じような
リハビリが自宅で
簡単にできる

日本特許第6626284・アメリカ特許10932979

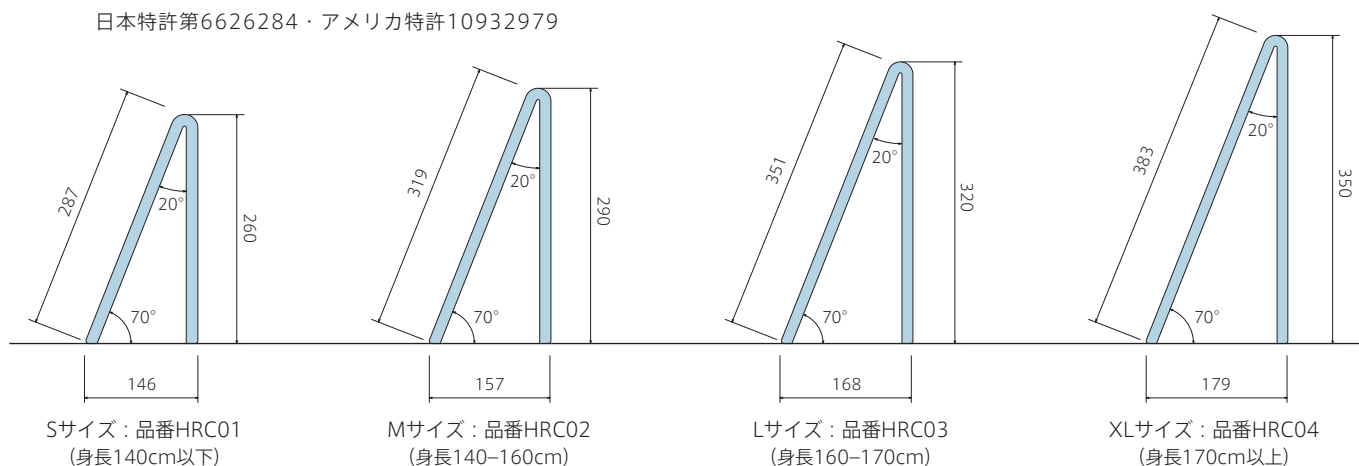

お問い合わせ先

Tel | 03-6435-2611
Fax | 03-6435-2614
Mail | info@s-a.jp

ネットでのご注文は <https://s-a.jp>

サージカルアライアンス株式会社

〒105-0014 東京都港区芝3-24-1 駿河ビル2F
Tel. 03-6435-2611 Fax. 03-6435-2614



使用方法是こちら




膝リハビリクッションは、膝関節のリハビリにおいて屈曲訓練に用いるクッションです。仰向け、または座位の状態で膝裏に置き、膝関節を支えつつバスタオルのようなものでつま先を太もも側に引き寄せることにより他動的に膝の屈曲運動を行います。膝関節の筋肉及び軟部組織の拘縮防止、膝関節屈曲角度の低下防止に効果的です。入院中にCPMの代わりとしても使用可能で病棟スタッフの負担も軽減できます。

より深屈曲が可能な方への使用方法

膝の屈曲角度が十分にあり、クッションの斜面にふくらはぎが接触してしまう場合は...

本製品のカバーを取り外すと、ウレタンが三分割されています。

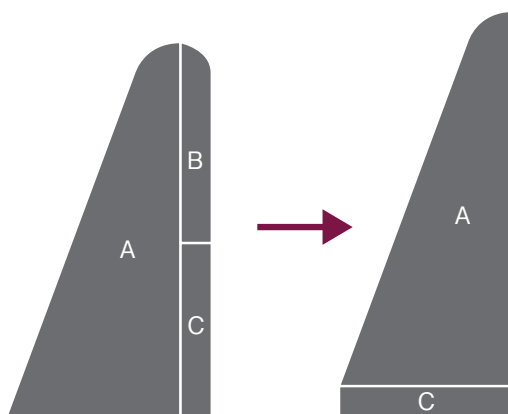

CをAの底面に移動させてカバーをつけ直します。こうすることで、より深い屈曲角度に対応可能になります。

※ Bは使用しませんが、反対足の手術を予定されている場合等はなくさないように保存しておいてください。

本品カバーは取り外し可能です。
洗濯機で通常通り洗えますので、いつも清潔に保てます。

材質：本体／ウレタン製、カバー／綿76％・ポリエステル24％
寸法：幅180mm×奥行146-179mm×高さ260-350mm

！ ご使用上の注意

- ・適切なサイズを使用し、適切な方法で使用する
- ・圧迫による皮膚障害や血行障害を防止するため、過剰な力で使用しない
- ・本体部は洗濯しない



弊社ウェブサイトでは、実際のリハビリの動画や使用方法、膝リハビリクッションについての学会での発表を載せています。

ウェブサイトURL

<https://s-a.jp>

