



Surgical Alliance inc.

— Creation of New Value —

サージカルアライアンス


アブダクションピロー

日本人の体型に合った外転枕



SAアブダクションピロー

日本人の体型を基本に開発したことにより、更なるフィット感をお届けします。
創部の包帯交換の時には、膝の間に挟むことで側臥位でも使用できます。

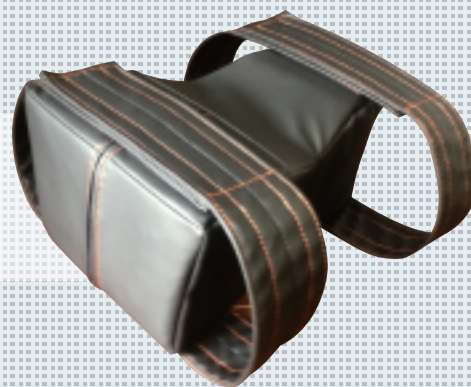

SAアブダクションピロー ミニ

車椅子に座った時に太ももの間に挟むことで、外転位を保ちます。

SAアブダクションピロー カバー


アブダクションピローには、ディスプレイカバーをご用意いたしました。
肌に直接触れることを防止し、清潔に保ちます。



ご使用方法


アブダクションピロー

【仰臥位の場合】

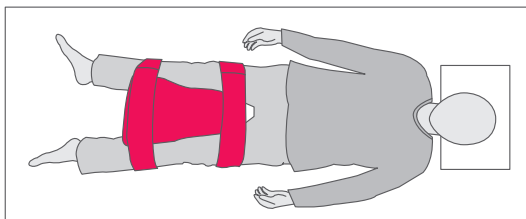

アブダクションピローの中心と膝の中心を合わせ、ベルトを固定して下さい。
脛骨側のベルトは、神経麻痺や痺れの原因を誘発する恐れがありますので、
脛骨外側部の腓骨頭に掛からないようにして下さい。


【側臥位の場合】

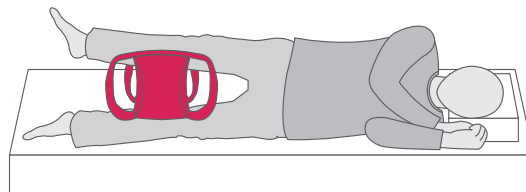

側臥位への体位変換や創部の包帯交換の時には、
アブダクションピローを横にして膝に挟むことによって外転位を保てます。

アブダクションピロー ミニ

車椅子に座った時に太ももの間に挟み、
マジックテープを外して 肘掛けに固定しま
す。本製品は、両足を固定するものでは
ありませんのでご注意下さい。

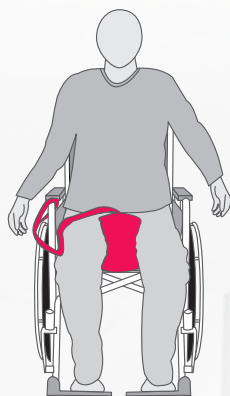

⚠ ご使用上の注意

- ・使用前に破損やほつれが無い事をご確認下さい。
- ・使用中は固定状態の確認を定期的に行って下さい。
- ・アブダクションピロー及びピローミニを水等の液体に浸さないで下さい。
- ・マジックテープにホコリや糸くずが付着した場合はブラシ等で取除いて下さい。
- ・表面をアルコールで拭いた場合に白く跡が残る事があります。

	SAアブダクションピロー	SAアブダクションピロー ミニ	SAアブダクションピロー カバー
カタログ番号	AP01	AP02	AP03
材 質	合成皮革/チップモールドウレタン/マジックテープ	合成皮革/チップモールドウレタン/マジックテープ	綿100%
長 さ	390mm	660mm ※ベルトを含む	—
幅	290mm(最大値)	130mm	—
高 さ	180mm	155mm	—
備 考	—	—	ディスプレイザブル

お問い合わせ先

Tel | 047-712-5629
Fax | 047-712-5630
Mail | info@s-a.jp

サージカルアライアンス株式会社

<http://s-a.jp>

本 社 : 〒105-0014 東京都港区芝3-24-1 駿河ビル2F
Tel. 03-6435-2611 Fax. 03-6435-2614

PB事業部 : 〒272-0032 千葉県市川市大洲3-15-2
Tel. 047-712-5629 Fax. 047-712-5630